

medela 

mother's milk,
everyday amazing™

Medela Milchpumpen mit Flex™ Technologie


Für ein völlig neues Abpumperlebnis,
individuell auf dich abgestimmt



NEU

Medela Milchpumpen mit Flex™ Technologie

Für ein völlig neues, ganz persönliches Abpumperlebnis

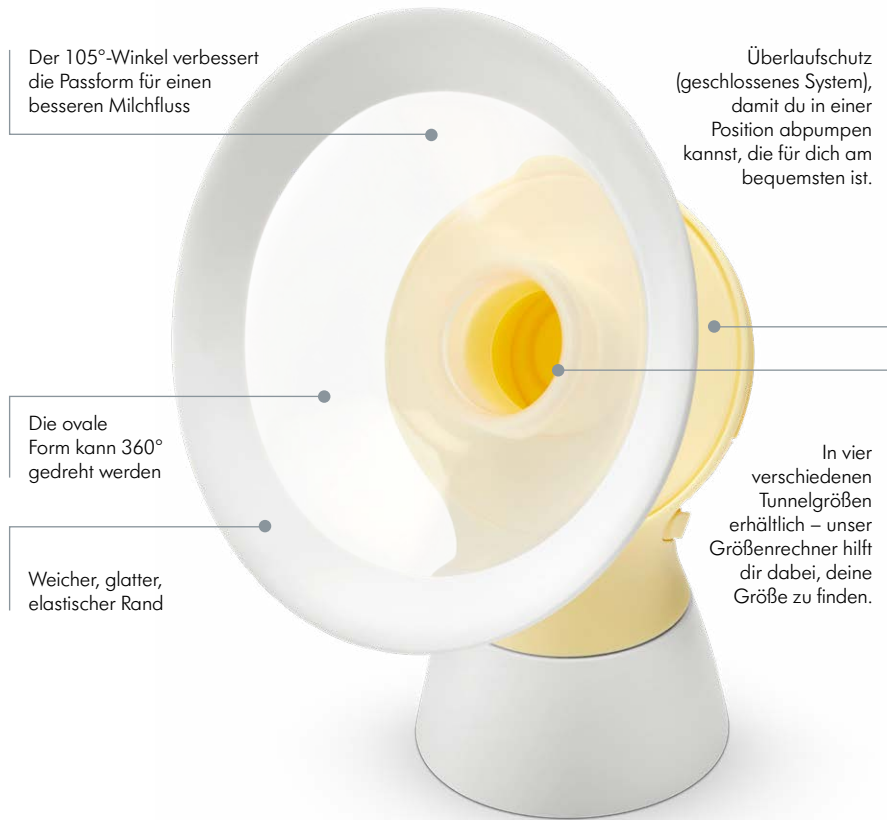

Jede Mutter ist einzigartig. Von der Form ihrer Brüste und Brustwarzen bis zu den Anforderungen ihres Alltags. Unsere neuen Milchpumpen mit Flex™ Technologie sind die ersten, die sich ganz individuell deiner Körperform anpassen – und so das Abpumpen noch bequemer und effizienter machen.



Die PersonalFit Flex™ Brusthaube

Die neue PersonalFit Flex™ Brusthaube wurde gemeinsam mit einem Team aus stillenden Müttern und Wissenschaftlern entwickelt. Sie wurde speziell entwickelt, um sich deiner Körperform anzupassen und deinen Milchfluss zu fördern, indem sie Druck auf die Milchkanäle verhindert. So findet jede Mutter leichter die Abpumpposition, die für sie am bequemsten ist. Das Ergebnis? Bequemer, effizienteres Abpumpen, das sich deinen Bedürfnissen anpasst – nicht umgekehrt.



2-Phase Expression® Technologie

Wenn dein Baby an deiner Brust trinkt, saugt es anfangs schnell, um den Milchfluss in Gang zu bringen, und wechselt dann in einen langsameren Rhythmus, um zu trinken. Die 2-Phase Expression® Technologie von Medela imitiert dieses natürliche Saugverhalten. Für ein besonders angenehmes, natürliches Gefühl beim Abpumpen.

Beidseitiges Abpumpen von Muttermilch

Die Forschung zeigt, dass durch die einzigartige Kombination von beidseitigem Abpumpen und 2-Phase Expression® Technologie – im Vergleich zum abwechselnden, einseitigen Abpumpen – mehr Milch in kürzerer Zeit gewonnen werden kann. Die so abgepumpte Milch hat außerdem einen höheren Energiegehalt.

Mehr Milch und Komfort, von Müttern bestätigt

Unsere Wissenschaftler haben die PersonalFit Flex™ Brusthaube in vier klinischen Studien mit stillenden Müttern getestet. Im Rahmen einer Auswertung von über 1000 Pumpvorgängen konnten sie nachweisen, dass die neue Technologie mehr Komfort und höhere Effizienz bietet. Wie jedes Medela Produkt wurden auch unsere Flex™ Milchpumpen speziell entwickelt, um dich in der Stillzeit zu unterstützen. Damit du dein Baby so lange wie möglich mit deiner einzigartigen Muttermilch versorgen kannst.



Muttermilch ist einzigartig. Sie schenkt deinem Baby den besten Start ins Leben. Medela arbeitet seit mehr als 50 Jahren mit Muttermilch-Experten zusammen. Unser Anliegen ist es, jede stillende Mutter mit unserem Wissen, Know-how und einzigartigen Produktsortiment zu unterstützen. Dazu gehören auch unsere Milchpumpen Made in Switzerland, auf die medizinisches Fachpersonal weltweit vertraut.

Unsere Milchpumpen mit Flex™ Technologie

Swing Flex™

Für schnelles, effizientes Abpumpen. Überall und jederzeit.



Swing Maxi Flex™

Für mehr Milch in der Hälfte der Zeit



Freestyle Flex™

Bietet die Flexibilität, immer und überall abpumpen zu können



Pumpentyp	Elektrische Einzel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe
Empfohlene Anwendung	Gelegentlich	Täglich	Täglich
Einfach und bequem	•	•	•
PersonalFit Flex™ Brusthaube	•	•	•
Individuell einstellbare Vakuumstärke	•	•	•
Vakuumbereich	-45mmHg bis -245mmHg	-45mmHg bis -245mmHg	-45mmHg bis -245mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Überlaufschutz (geschlossenes System)	•	•	•
BPA-frei	•	•	•
Verbindung mit der MyMedela-App			•
Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt die Abpumpdauer, den Akkuladestatus, die Vakuumstufe, Bluetooth-Verbindung usw. an.			•
USB-Ladegerät			•
Batterie-/Akkubetrieb	Bis zu 1 Stunde (Batterie nicht inbegriffen)	Bis zu 1 Stunde (Batterie nicht inbegriffen)	Bis zu acht beidseitige Abpumpvorgänge mit eingebautem wiederaufladbarem Akku
All-in-One- Lösung zum Aufbewahren, Kühlen und Transportieren abgepumpter Muttermilch			Kühltasche, Muttermilchflaschen zur Aufbewahrung, Tragetasche
Gewicht	200 g ohne Batterien	220 g ohne Batterien	> 300 g inkl. wiederaufladbarem Akku
Größe	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm

*Klinische Studien, PersonalFit Flex im Vergleich zu PersonalFit, Daten auf Anfrage erhältlich (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Weitere hilfreiche und nützliche Tipps zum Stillen sowie zu den Pumpen und anderen Produkten von Medela findest du unter www.medela.de/flex